

GALA

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA
ELECTRIC WHEELCHAIR
MD (Medical Device)

MODEL:W5216A

SN:



ZHEJIANG INNUOVO REHABILITATION DEVICES CO., LTD.
No.196 Industry Road, Hengdian Movie Zone, Dongyang,
Zhejiang 322118, P.R. China

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



MERITUM S.L.
C/Serrano 63, 28006 Madrid
Tfno: (+34)91.022.55.70

Libercar 

www.libercar.es

Libercar 

GALA EL KØRESTOL



INDEKS

INTRODUKTION	Side 3-4
KONTROL	Side 5
FUNKTIONER	Side 6
INDSTILLINGER	Side 7
SAMMENKLAPNING OG UFOLDNING	Side 8
HJUL OG ANTI-TIP HJUL	Side 9
BATTERIER	Side 10-12
SIKKERHED	Side 13-17
GARANTI	Side 18-20

Bemærk: Før el kørestolen tages i brug første gang, skal modtageren inspicere det fuldstændigt. Hvis du finder andre skader, mangler eller egenskaber ved kørestolen end forventet, bør du ikke bruge kørestolen for første gang, og du skal straks kontakte forhandleren, hvor du købte produktet.

Ethvert krav om transportskader, mangel eller manglende overensstemmelse med produktet skal kommunikeres til din distributør og også til info@libercar.es inden for de første 24 timer efter modtagelsen. Efter denne periode på 24 timer eller efter at kørestolen er blevet frigivet, vil det ikke være muligt at reagere på ethvert krav om skade, mangel eller manglende overensstemmelse med produktet.

INTRODUKTION

Tiltænkt brug: scootere og el kørestole er designet og fremstillet som køretøjer til handicappede og er godkendt som klasse I medicinske produkter. Disse elektriske køretøjer er designet til at kompensere for gangbesvær hos deres brugere, men hvis visuelle, fysiske og mentale evner ikke påvirkes til at køre et elektrisk køretøj.

I overensstemmelse med den europæiske forordning 2017/745 for klasse I medicinsk udstyr bærer dette produkt en uudslettelig CE-mærkning med oplysninger om producenten, den europæiske repræsentant og importøren.

Det er vigtigt ikke at rive eller beskadige dette CE-mærket for at garantere produktets sporbarhed.

Brug kun kørestolen, når det er i perfekt stand. Ellers kan du sætte din og andres sikkerhed i fare.

Stop med at bruge kørestolen, og underret din forhandler i følgende tilfælde:


- Bremse- eller systemfejl
- Du hører mærkelige lyde eller lugter brændende lugte.
- Hjul i dårlig stand (slidt, deformeret)
- Armlæn eller fodstøtte i dårlig stand.
- Ledninger i dårlig stand
- Køretøjet hælder til den ene side/fremad/bagud.
- Enhver anden uregelmæssighed i køretøjet.

Begrænset ansvar: ethvert ansvar for skader, der opstår som følge af:

- Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen.
- Forkert montering eller installation.
- Naturligt slid.
- Uautoriserede ændringer af den originale konfiguration.
- Brug af uoriginale reservedele.

KONTROL


1. Tænd sluk
2. Batteriindikator
3. Hastighedsindikator
4. Reducer hastigheden
5. Øg hastighed
6. Deaktiver bip ved bak (tryk imens)
7. Aktiver bip ved bak (tryk imens)
8. Horn
9. Joystick

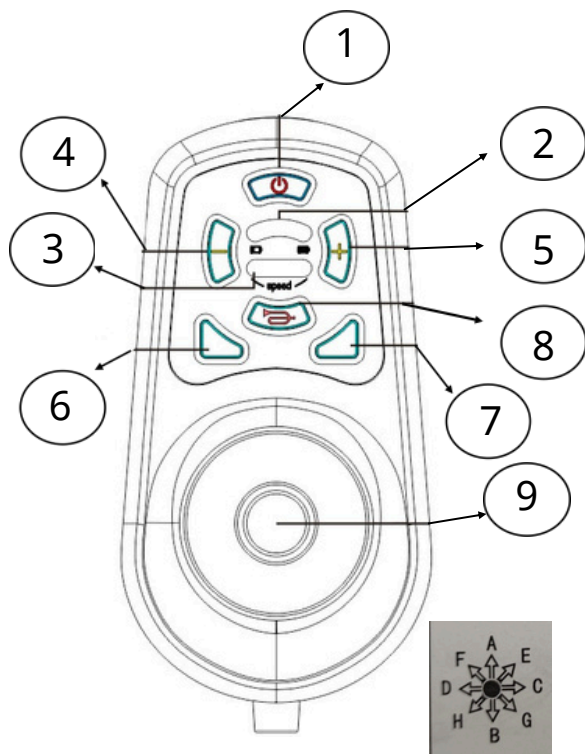

OPMÆRKSOMHED: Joysticket er et meget sart element. Læn dig ikke på joysticket, når du stiger op eller ud af stolen.

Undgå slag, da de elektriske komponenter indeni kan blive beskadiget (ikke dækket af garantien).

For at udtrække eller justere den ønskede position på joysticket skal du blot løsne strammeknappen, og når den er i den ønskede position, strammes knappen igen. Sørg for, at knappen er stram for at undgå at tabe joysticket.

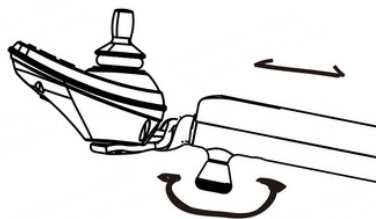

FUNKTIONER

ELEKTRISK/MANUEL TILSTAND

Stolen kan bruges i 2 tilstande (elektrisk eller manuel) afhængigt af koblingsgrebenes position (der er 2 håndtag, og de er placeret på indersiden af hvert baghjul (se figur)).

Kørestol i NEUTRAL (manuel): fremdriftssystemet er deaktiveret, og kørestolen kan skubbes manuelt. For at kørestolen skal være i neutral, skal begge koblingshåndtag være i manuel position.

Kørestol TILKOBLET (elektrisk): fremdriftssystemet aktiveres og kørestolen drives elektrisk. For at kørestolen skal være i elektrisk tilstand skal begge koblingshåndtag være aktiveret til elektrisk.

Håndtag til elektrisk og manuel tilstand



OPMÆRKSOMHED! FARE:

- Lad aldrig kørestolen stå i neutral på en skråning.
- Stig ikke på eller af kørestolen i neutral position, da den er i fri tilstand og kan bevæge sig, når den støttes og få brugeren til at falde.
- Stig ikke på eller af kørestolen, mens den er tændt, da der er risiko for utilsigtet at aktivere joysticket og få brugeren til at falde.

INDSTILLINGER

FODSTØTTE: For at folde fodstøtten skal du blot hæve platformen opad (det er ikke nødvendigt at betjene noget håndtag).

ARMLÆN: Tryk på for at folde armlænene ned (og tillade brugerforflytninger).



Knap til at løfte armlæn



OPMÆRKSOMHED: Undlad at løfte eller trykke på skubbestangen for at løfte forhjulene med en siddende person (fare for brud).

BATTERIER: I bunden af batteriet er der et udløsergreb/tap. For at isætte eller fjerne batteriet, skal du først trykke på den tap og derefter, når batteriet er løsnet, trække håndtaget på batteriet forsigtigt udad eller skubbe det indad.



OPMÆRKSOMHED: Når du sætter batteriet tilbage i skinnen, skal du gøre det forsigtigt. Hvis du indsætter den for hurtigt, kan du beskadige tilslutningsklemmerne (ikke dækket af garantien).

SAMMENKLAPNING OG UDFOLDNING

SAMMENKLAPNING: På bagsiden af din stol finder du en metalplade, der blokerer for kørestolens foldemekanisme. For at sammenklappe kørestolen skal du trække pladen ud og folde kørestolen sammen.



Metalplade låse-mekanisme

LÅS EFTER UDFOLDNING: For at folde stolen ud skal du blot trække op i ryglænet, indtil du hører et klik, dette vil indikere, at kørestolen er åben og mekanismen er låst.



VIGTIG! FARE! Husk altid at tjekke foldesystemet, da kørsel uden låst mekanisme kan forårsage skade.

HJUL OG ANTI-TIP HJUL

HJUL:

For- og baghjulene er solide, så de kræver ingen specifik vedligeholdelse.

ANTI-TIP HJUL:

Er solide, så de kræver ingen specifik vedligeholdelse.

Efterspænd skruer løbende.



anti-tip
hjul



VIGTIG! FARE! Kør ALDRIG, hvis anti-tip-hjulene viser tegn på slid eller brud.

BATTERIER

Kørestolens batteri er forseglet og kræver ingen vedligeholdelse.

Batteriet placeres på skinnen under sædet.

For at tilslutte eller fjerne batteriet (se indstillinger).

SÅDAN OPLADES BATTERIET:

.Sæt opladeren i stikkontakten og tilslut oplader til batteri eller joystick.

- Mulighed 1/ Tilslut opladeren til batteriet gennem stoleryggen.
- Mulighed 2/ Fjern batteriet fra kørestolen og tilslut opladeren til det.
- Mulighed 3/ Tilslut opladeren til joysticket.

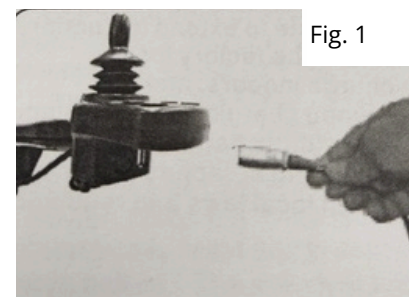


Fig. 1

BATTERIER

Afhængigt af din opladermodel vil du observere en af disse opladerlysskifteprocesser:

Type A oplader: rød (væg) / orange (stolebelastning) / grøn (slut på last)

Type B oplader: grøn (væg) / blå (stol opladning) / grøn (slut på opladning)



OPMÆRKSOMHED! Opbevar dine batterier på et tørt sted. Undgå dyb afladning af dit batteri. Oplad ikke mere end 24 timer i træk pr. cyklus.

KAN JEG BRUGE EN ANDEN OPLADER END DEN LEVEREDE? INGEN.

Brug altid den oplader, der fulgte med din kørestol.

HVOR OFTE SKAL BATTERIER OPLADES?

Det er tilrådeligt at oplade batterierne, når du er færdig med at bruge kørestolen. Dette vil hjælpe med at forlænge levetiden af dine batterier. Hvis du bruger kørestolen mindre end en gang om ugen, anbefales det at lade den ugentligt op.

HVORDAN FORØGES LEVETIDEN FOR BATTERIET?

Dybe fulde opladningscyklusser giver større ydeevne og længere batterilevetid. Hold dine batterier fuldt opladet, når det er muligt. Batterier, der er dybt afladede, som ikke oplades efter hver brug, eller som kun er delvist opladede, vil lide accelereret slid, reduceret rækkevidde og vil forkorte deres levetid.

BEMÆRK! Et batteris levetid er normalt en afspejling af den pleje, det modtager

BATTERIER

HVORDAN FÅR MAN DEN MAKSIMUM YDELSE PR. OPLADNING?

Generelt kører du aldrig under ideelle forhold (flad, fast overflade uden kurver eller skråninger). Generelt kørsel på skrånende terræn, ru overflader. Alle disse faktorer gør, at den angivne maksimale rækkevidde reduceres. Følg følgende instruktioner for at opnå længst rækkevidde:

- Oplad batterierne helt før hver tur.
- Planlæg din rute på forhånd for at undgå skråninger og forhindringer.
- Begræns belastningen af stolen.



OPMÆRKSOMHED! Det er meget vigtigt, at du holder dine batterier væk fra høje temperaturer eller udsættes for solen for at undgå risiko for eksplosion eller brand. Oplad dem altid på ventilerede steder og isoleret fra andre elementer.

HVORDAN SKAL JEG OPBEVARE KØRESTOLEN OG BATTERIET?

Hvis du ikke bruger din stol regelmæssigt, anbefaler vi at lade den op mindst en gang om ugen. Hvis du planlægger ikke at bruge din stol i en længere periode, skal du oplade den helt, frakoble batterierne og opbevare din stol på et tørt sted væk fra varmekilder eller sol.

HVORDAN TRANSPORTERER JEG BATTERIET?

Lithium-batterier og gel-batterier kan transporteres komfortabelt, da der ikke er risiko for spild. Vi anbefaler, at du kontakter dit transportfirma, inden du foretager turen, for at finde ud af deres specifikke transportforhold.

SIKKERHED

- Brug ikke kørestolen uden først at have læst og forstået denne brugervejledning.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende advarsler, forholdsregler eller instruktioner, skal du kontakte din forhandler, før du betjener kørestolen.
- Forkert brug, manglende vedligeholdelse, uautoriserede ændringer, brug af uegnede reservedele kan forårsage personskade, beskadigelse eller død.
- Smid ikke tændte cigaretter eller andre brændbare genstande på kørestolen, da brand kan forårsage skade, alvorlig personskade eller død. Personen i kørestolen er i særlig risiko for alvorlig personskade, fordi de muligvis ikke er i stand til at bevæge sig væk fra kørestolen. RYG IKKE, mens du bruger kørestolen.
- Kør aldrig kørestolen under påvirkning af medicin eller alkohol.
- Sluk for kørestolen, før du stiger på eller af.
- Sørg for, at bremserne deaktiveres automatisk, når motorerne er frakoblet.
- Frihjulsdraft anbefales kun på plane overflader, aldrig på skråninger.
- Efterlad aldrig kørestolen på en skråning med afkoblede motorer. Sæt altid motorerne i igen umiddelbart efter, at du har skubbet på det kørestolen.
- Hvis du skal bremse i en nødsituation, skal du blot slippe joysticket og lade kørestolen standse fuldstændigt.

SIKKERHED

- Undgå at opbevare eller bruge kørestolen i nærheden af ild eller brændbare produkter.
- Overskrid ikke den maksimalt tilladte belastning.
- Kørestolen er kun designet til brug af en enkelt passager, hvis maksimalvægt ikke overstiger kørestolen maksimalt tilladte belastning. Brug aldrig kørestolen til at transportere læs eller mere end én person.
- Udsæt ikke kørestolen for direkte sollys i længere perioder, da dette forringer plastikoverflader, polstring, metaldele.
- Tilslut ikke nogen elektrisk enhed til kørestolen, som ikke er udtrykkeligt certificeret af producenten.
- Undgå at udsætte elektriske komponenter for vand eller andre væsker.
- Enhver manipulation af batterier skal udføres af en kvalificeret fagmand.
- Elektromagnetisk stråling: Betjen ikke radiosendere, mobiltelefoner eller tilslut dem, mens køretøjet er tændt. Undgå at være i nærheden af radio- og tv-udsendelseskilder.
- Hvis kørestolen ved et uheld begynder at bevæge sig, eller bremserne deaktiveres, skal du straks stoppe kørestolen.
- Rapportér alle hændelser med uønsket bevægelse eller frakobling af den elektriske bremse til din forhandler.
- Benyt kun på skråninger, der ikke overstiger den maksimale sikkerhedshældning og kun med ryglænet i lodret position og sædet i den laveste position.

SIKKERHED

- Kør ned ad bakke med maksimalt 50 % af den maksimalt justerbare hastighed.
- Undgå pludselig opbremsning eller acceleration på skråninger.
- Undgå så vidt muligt at køre på våde, glatte, iskolde eller fedtede overflader (såsom sne, grus, is osv.).
- Forsøg aldrig at overvinde en forhindring, når du går op eller ned af en skråning.
- Forsøg aldrig at gå op eller ned af trapper.
- Nærm dig altid forhindringer i en lige linje. Sørg for, at for- og baghjulene går over forhindringen på én gang, stop ikke lige i midten.
- Undgå at ændre dit tyngdepunkt samt pludselige retningsændringer, når kørestolen bevæger sig. Brug aldrig det el kørestolen til at transportere mere end én person. Overskrid ikke den maksimalt tilladte belastning.
- Når du oplader kørestolen, skal du altid fordele vægten jævnt.
- Forsøg altid at holde det elektriske køretøjs tyngdepunkt i midten og så tæt på jorden som muligt.
- Bemærk venligst, at kørestolen vil bremse eller accelerere, hvis du ændrer kørehastigheden under kørslen. Kør gennem snævre områder med minimumshastighed og med forsigtighed. Vælte: Der er risiko for at vælte, når du drejer eller vender mod skråninger.
- Overskrid aldrig sikkerhedshældningen på 12%.

SIKKERHED

Reducer hastigheden, før du udfører en udfordrende manøvre. Accelerer først, når du er færdig med at udføre manøvren. Bemærk venligst, at sædehøjden har stor indflydelse på tyngdepunktet. Jo højere sædehøjden er, jo større er risikoen for at vælte.

Bemærk venligst, at el kørestolen som klasse A-produkt primært er beregnet til indendørs brug, så det er ikke nødvendigvis i stand til at overvinde alle udendørs forhindringer.

Forkert reparation eller vedligeholdelse udført af brugere/plejere eller ukvalificeret personale kan resultere i skader, alvorlig personskade eller død.

Risiko for ulykker og tab af garanti, hvis vedligeholdelsen er utilstrækkelig. Brug af uegnede reservedele kan forårsage personskade eller beskadigelse.

Reservedele skal nøjagtigt matche de originale specifikationer.

Det anbefales altid at bruge originale reservedele og angive køretøjets serienummer for at lette korrekt overensstemmelse mellem reservedelene. CE-mærkningen vil være ugyldig, hvis komponenter eller tilbehør, der ikke er godkendt til dette produkt, udskiftes eller tilføjes. I dette tilfælde vil den virksamhed, der tilføjer eller udskifter komponenterne eller tilbehøret, være ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen/CE-mærkningen eller registreringen af det elektriske køretøj som et særligt design.

SIKKERHED

Følg altid disse instruktioner for at køre sikkert:

Når du kører op ad en skråning, prøv at holde din stol i bevægelse, og hvis den stopper, start meget langsomt. Når du kører ned ad en skråning, skal du reducere hastigheden til et minimum for bedre kontrol. Hvis din kørestol kører hurtigere end ønsket, skal du slippe joysticket, indtil kørestolen stopper. Sørg for, at den valgte hastighed er minimumshastigheden, og start forsigtigt igen.

Hvis du, når du går op/ned ad en skråning, bemærker, at et hjul glider og ikke bremser, skal du **IKKE** benytte denne skråning.

Hvis du ikke er 100% sikker ved en skråning, skal du ikke benytte den, medmindre du er ledsaget af en anden person, der kan hjælpe dig i tilfælde af en hændelse eller væltning.

- Foretag ikke pludselige bevægelser eller læn dig tilbage, når du passerer over en forhindring eller rampe, da dette kan flytte tyngdepunktet og få kørestolen til at vælte.
- Kør over forhindringer med konstant hastighed (accelererer eller bremser ikke).
- På skråninger skal du ikke zig-zagge, kør kørestolen lige og vend front mod skråningen (ikke diagonalt) for at undgå risiko for at vælte eller falde.
- Når du skal møde en rampe eller forhindring, skal du gøre det ved den laveste hastighed.

Undlad at benytte skråninger på glat eller farligt terræn

(døråbningsgulve, der ikke hæfter godt, sne, is, græs, våde overflader).

Bak aldrig på en stejl skråning. Dette kan forårsage alvorlig personskade.



FARE!

Den maksimale sikkerhedshældning er 12%.

Du må ALDRIG benytte en hældning på mere end 12%.

GARANTI

Sælger er ansvarlig for enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterede på leveringstidspunktet, og som viser sig inden for en periode på to år fra købsdatoen.

Følgende årsager anses IKKE for manglende overensstemmelse ved oprindelsen og er derfor udelukket fra garantien:

- Dele, der lider under normalt slid i forbindelse med brugen af køretøjet. Disse elementer omfatter blandt andet batterier, bremser, motorbørster og viklinger, kobling eller elektromagnetisk bremse, affjedring, dæksler, hjul, lejer, tætninger, pakninger, pneumatiske kamre, pærer, sikringer, polstring, armlænsputer, håndtag og andre elementer Lignende.

Til dette formål fastlægger producenten den normale brugstid for følgende forbrugselementer:

- Batterier: 6 måneder (batterierne i et elektrisk køretøj er dets energi og fremdriftskilde, så progressivt slid i forbindelse med brugen af køretøjet er normalt). Hvis batterierne udviser en mangel på overensstemmelse ved oprindelsen, vil dette manifestere sig fra de første anvendelser med en væsentligt reduceret autonomi i forhold til det forventede. Hvis du bemærker nogen uregelmæssigheder i driften af dit batteri, skal du straks informere din forhandler. Ved batterifejl efter 6. måned og efter at have fungeret normalt i de første 6 måneder, formodes det, at problemet skyldes normalt slid på batteriet og ikke manglende overensstemmelse ved oprindelse.

GARANTI

- Ødelagte eller manglende dele.
- El kørestolen er ikke blevet korrekt vedligeholdt.
- Fejl og skader forårsaget af usædvanlig eller intensiv brug eller udlejning til tredjemand.
- Enhver adskillelse, reparation, ændring eller modifikation, der ikke er udført af producenten eller af personale, der udtrykkeligt er autoriseret af denne.
- Deformation eller beskadigelse af hjul.
- Ukorrekt brug, misbrug, uagtsomhed eller ulykke, uanset årsagen.
- Spild af væsker og/eller fødevarer på produktet, udseende af korrosion og/eller rust.
- Ridser eller skader på karrosseri, plastik, polstring... og alle andre udvendigt udsatte dele af produktet.
- Problemer med joysticks, opladere og andre elementer, der har udvendige skader (buler, ridser, løshed).
- Udførelse af justeringer eller tuning af køretøjet (hjuljustering, styring, hardwarejusteringer).
- Vibrationer og støj i forbindelse med betjeningen af køretøjet.
- Forringelse, misfarvning, ændring eller deformation af stykkerne på grund af ældning.
- Små olielækager fra pakninger og tætninger.
- Manglende overholdelse af forpligtelsen til at reparere køretøjet så hurtigt som muligt efter opdagelse af en fejl.

GARANTI

Denne garanti kan ikke udøves i nogen af følgende tilfælde:

- Manglende købsbevis. Det er vigtigt at opbevare din købskvittering for enhver garantireparation.
- Hvis udstyrets serienummer er beskadiget, er blevet fjernet eller er blevet pillet ved.

For ethvert problem i garantiperioden:

- Kontakt forhandleren, hvor du købte el kørestolen.
- Medmindre andet er angivet, skal du tage el kørestolen til Libercars tekniske service. Hvis der ikke er nogen Libercar teknisk service i dit område, skal du tage dit el kørestol til den forhandler, hvor du købte det, eller du kan anmode om afhentning og levering til dit hjem ved at betale et bidrag til transportomkostningerne.

Vigtigt: Hvis der ikke er nogen fejl, og der kræves ingen reparation ved modtagelse af el kørestolen hos den tekniske service. Køberen skal ikke betale noget beløb for den tid, der er brugt til fejlfinding, men skal betale eventuelle forsendelsesomkostninger.

Bemærk: Før el kørestolen tages i brug første gang, skal modtageren inspicere det fuldstændigt. Hvis du finder andre skader, mangler eller egenskaber ved el kørestolen end forventet, bør du ikke bruge el kørestolen for første gang, og du skal straks kontakte forhandleren, hvor du købte el kørestolen.

Ethvert krav om transportskader, mangel eller manglende overensstemmelse med produktet skal kommunikeres til din distributør og også til info@libercar.es inden for de første 24 timer efter modtagelsen.

Efter denne periode på 24 timer eller efter at el kørestolen er blevet frigivet, vil det ikke være muligt at reagere på ethvert krav om skade, mangel eller manglende overensstemmelse med produktet.

Bemærk: Gem alle emballageelementer, der blev leveret med el kørestolen, hvis det er nødvendigt at transportere det til reparation.